

คำแนะนำวิธีใช้

ขอแสดงความยินดีกับการที่ท่านซื้อ PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® ได้ช่วยให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จกว่า 14 ปี เมื่อมีใบสั่ง PHALLOSAN® forte จากแพทย์ ท่านสามารถเบิกเงินจากสำนักงานประกันสุขภาพได้ ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางระบบท่อปัสสาวะ และนักเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ PHALLOSAN® forte ที่มีนวัตกรรมสูงส่งในด้านนี้


ลักษณะการใช้งาน

PHALLOSAN® forte ได้รับคำแนะนำให้ใช้ในกรณี

- » การทำให้อวัยวะเพศชายเพิ่มขนาด และเพิ่มความยาว
- » กรณีที่อวัยวะเพศชายโค้งงอ โดยกำเนิด หรืออาการโรคเพโรนี (Induratio penis plastica/IPP)
- » รายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
- » การบำบัดประกอบหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
- » ผีกฝืนเนื้อเยื่อลักษณะฟองน้ำในวัยชรา


รายการสินค้าจัดส่ง

1. เข็มขัด, ซึ่งใช้คาดรอบเอว รวมทั้งวงแหวนฟองน้ำ (A) ซึ่งใช้ยึด โดยสอดอวัยวะเพศชาย หัวเข็มขัดเลื่อนได้ (B) เพื่อท่านจะสามารถปรับความยาวได้ตามต้องการ และตัวปรับที่เข็มขัด (C) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับที่ดูด
2. ที่ดูดขนาด L ของ PHALLOSAN® forte – ถุงยางขนาด L
3. ที่ดูดขนาด M ของ PHALLOSAN® forte – ถุงยางขนาด M และห่วงที่ดึง (6)
4. ที่ดูดขนาด S ของ PHALLOSAN® forte – ถุงยางขนาด S
5. ที่สวมคลุมป้องกันปลายของขดลวด เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสแรงดูดโดยตรง
6. ห่วงที่ดึงไว้ระบบสวิงเพื่อใช้ดึงแรงดูด ระบบสัญญาณไฟ (เขียวเหลือง แดง) ที่ปรับสำหรับเข็มขัด
7. ที่ดูดซึ่งมีวาล์ว 3 ทาง
8. วัสดุภัณฑ์ PHALLOSAN® forte
9. คำแนะนำวิธีใช้
10. แบบใช้วัด

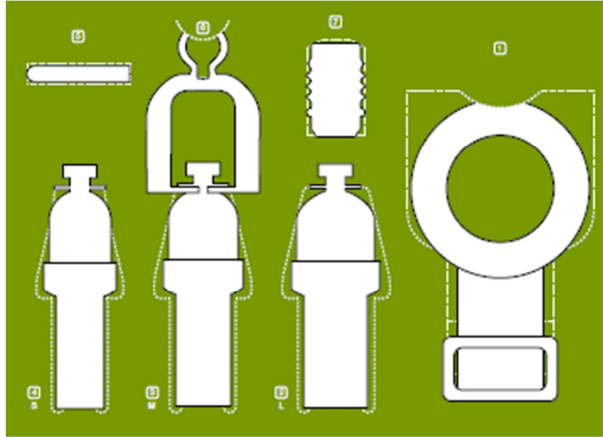

การเตรียมที่จะใช้

1. เข็มขัด

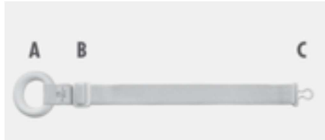

คัลเข็มขัดของ PHALLOSAN® forte

ซึ่งสร้างตามแนวแพทย์โรคกระดูกออก

และปรับความยาวโดยใช้หัวเลื่อน (B)

ให้ได้ความยาวตามต้องการ

2. การเลือกขนาดที่ดูด และถุงยาง

วัดขนาดอวัยวะเพศด้วยเครื่องมือวัด (10)

เพื่อเลือกใช้ขนาดของถุงยาง

และที่ดูดได้อย่างถูกต้อง

ดึงอวัยวะเพศชายที่แข็งตัวในทิศออกจากร่างกาย และวัดบริเวณโคนอวัยวะเพศ



ที่ดูดขนาด M (3) ถุงยางขนาด M (3) และห่วงที่ดึงซึ่งได้เตรียมต่อกับอุปกรณ์ส่วนที่ 1 ซึ่งดึงไว้เรียบร้อยแล้ว

หากท่านต้องการใช้ขนาดอื่นโปรดแกะห่วงที่ดึง (6)

เลือกขนาดที่เหมาะสม

และปรับเพื่อให้เข้ากับที่ดูด

ซึ่งจะคลิกเข้าที่เมื่อตรงกับตำแหน่งลูกศร (

☞) ถุงยางที่เหมาะสม (2)

ใช้สวมถุงยางทับส่วนนูนของที่ดูดแล้วประกอบ

ห่วงที่ดึงเข้าเช่นเดิม (6)



ในการสวมถุงยางต้องระวังให้วงยึดของถุงยาง

ปลายส่วนที่หนาที่สุดนั้นสวมอยู่บนส่วนนูนของที่ดูด และยึดติดแน่น

หากถุงยางถูกดึงรัดเข้ามามากเกินไปจน

อาจทำให้ถุงยางฉีกขาดได้



ภาพบน ผิด ถูกดึงรัดเข้ามามากเกินไปจนควรและไม่แข็งแรง

ภาพล่าง ถูกต้อง และมีเพียงพอ

โปรดทราบว่าถุงยางที่มีแข็งปกคลุมนั้น

หลังจาก 2-3 วัน แข็งจะหมดไป

ดังนั้นท่านจึงควรหาแป้นเด็ก

และใช้ทาที่ผิวหนังนอกของถุงยาง

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันการดูด

การเหนียวติดที่ผิวหนังนอกของถุงยาง

และป้องกันการฉีกขาดได้

หนีบที่ดูดไว้ระหว่างหัวเข้าทั้งสองข้างของท่าน

ม้วนถุงยางด้วยความระมัดระวัง ดึงเบาๆ

จนอีก 1 ซม. จะถึงที่ดูด

แล้วดึงสวมถุงยางให้เลยส่วนนูนของที่ดูดไป

โปรดระวังไม่ให้ของถุงยางฉีกขาดด้วยเล็บที่คม หรืออย่างอื่น

แล้วใช้แรงเล็กน้อยในขณะที่คลายถุงยางออก

ก



สิ่งพิเศษของ PHALLOSAN® forte ใหม่

ถุงยางใน PHALLOSAN® forte

ทำด้วยซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้

และระคายเคืองได้

นวัตกรรมนี้ไม่เพียงทำให้เกิดความสบาย

แต่ยังทำให้มีความแนบตัวไปตามการเคลื่อนไหว

ของอวัยวะเพศ และตรงบริเวณที่หนา 3

มม. เป็นตรงที่จะนำที่ดูดมาสวมใส่

ส่วนอื่น ๆ มีความหนา 0.3

มม. และนุ่มแนบตัวไปตามยาวของอวัยวะเพ

ศ

ส่วนที่ดูดนั้นพร้อมเสร็จเพื่อการใช้งาน

3. ที่คลุมป้องกัน


โปรดใช้ที่คลุมป้องกัน (5)

ที่มีขนาดเหมาะกับอวัยวะเพศ

ใช้นิ้วหัวแม่มือ

และนิ้วชี้ทั้งสองมือเพื่อดึงยึดที่คลุมออกจากก

น แล้วสวมทับลงบนส่วนปลายของคชาต
ซึ่งในที่นี้เมื่อใส่แล้ว จะต้องพอดีพอดี

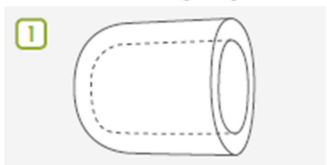

ที่สำคัญคือ

จะต้องไม่มีอากาศอยู่ภายในระหว่างที่คลุมแ
ละปลายของคชาต ซึ่งข้อดีคือ

หากสวมที่คลุมในขณะที่อวัยวะแข็งตัวเล็
กน้อย จะสามารถป้องกันปลายของคชาต

จากการที่ตึงแรงดูดสูงเกินไปได้

ผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์สามารถละการใ
ซ์ที่คลุมป้องกันได้

การเตรียมการเพื่อใช้จะถือได้ว่าสำเร็จลง

การใช้งาน

1. ใส่อวัยวะเพศพร้อมที่คลุมป้องกันลงใน
ที่ดูด

และเคลื่อนขยับออกจากส่วนบนของที่ดูด
เพื่อให้คลุมอวัยวะเพศ



2. หมุนแป้นที่จับสี่เหลี่ยมของวาล์วบนที่ดูด
(7) ไปสู่บริเวณที่แสดงว่า ทำงานดูด
และเปิดให้ปั๊มทำงานด้วยการกดด้วยมือ
หลายๆครั้ง
ซึ่งจะทำให้ปลายของคชาตถูกดึงเข้าไปใ
นที่ดูดเพิ่มมากขึ้น
ดูขยงแนบตัวไปตามล้ออวัยวะเพศ



3. หมุนแป้นที่จับสี่เหลี่ยมของวาล์วบนที่ดูด
(7) ไปสู่บริเวณที่แสดงว่า ปิด
เพื่อรักษาสุญญากาศในระดับเบาๆไว้



4. หยิบเข็มขัดที่ได้เตรียมคี่ไว้
และสวมวงแหวนพองน้ำ(A)
ครอบทั้งชุดตัวที่ดูดจนกว่าจะถึงส่วนโค
นของอวัยวะเพศ

5. คาดเข็มขัดที่ตรงบริเวณสะโพก

6. หมุนที่ยึดลักษณะคล้ายล้อ (6)
เพื่อหันด้านปลายเปิดเข้าหาตัว
และยึดติดเข้ากับห่วง (C)



7. ปรับเพิ่มความตึงของเข็มขัดได้โดยการเลื่อนตรงหัวเข็มขัด (B) จนท่านรู้สึกว่าย้วยเพศถูกดึงเบาๆ และสัญญาณที่เครื่องเป็นสีเขียวโปรดระวังให้เข็มขัดตรงบริเวณขาหนีบแขวนอยู่ในทิศทางเฉลี่ยขึ้น และดึงเข็มขัดทางด้านหลังเหนือบริเวณก้นให้สูงขึ้นในทิศทางเอว

8. หากคาดเข็มขัดอยู่ในระดับรอยพับก้น ในขณะที่นั่งจะเกิดแรงดึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ



9. แต่ไม่ใช่ท่านสามารถใช้ชีวิตตามปกติ ท่านสามารถใช้ PHALLOSAN® forte แม้ในเวลาอ่อน เพราะจะไม่มีเวลาใดที่การไหลเวียนของเลือดถูกรบกวน

เมื่อหยุดใช้

- เริ่มแรกถอดเข็มขัดออก หมุนแป้นที่จับสีเขียวของวาล์วนที่ดูออกไปสู่บริเวณที่เครื่องหมายลูกศร เพื่อคลายสัญญาณความตึง ความตึงจะคลายลงโดยอัตโนมัติ

ความพิเศษทางเทคนิค

โปรดรับทราบว่าเป็นเพียงการแสดงผลแบบง่ายที่สุดของเราที่มีระบบกันอากาศรั่วไหล จึงไม่สำคัญ

ว่าดูยางนั้นจะคลุมทับอวัยวะเพศถึงเท่าใด ดูยางไม่ได้ถูกทำมาเพื่อที่จะกระจายแรงดูไปทั่วอวัยวะเพศ

เพราะการกระจายแรงดูไปทั่วอวัยวะเพศได้มาจากแรงสัญญาณคาบๆภายในที่ดูเท่านั้น หากขณะเวลาปกติท่านรู้สึกว่าการสัญญาณลดลง

ทำให้ปลายองคชาตคลายตัวออกจากที่ดูได้ อาจมีหลายสาเหตุ ที่สำคัญคือมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปในที่ดูได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีทางเข้ามาทางเดียวกับอวัยวะเพศ อาจเป็นที่

ไม่ได้กำจัดขนในบริเวณนั้นให้ดี หรือเลือกใช้ดูยางที่มีขนาดใหญ่เกินไปปลายองคชาต

หากจำเป็นท่านจำเป็นต้องกำจัดขนในบริเวณอวัยวะเพศ อาจใช้การโกน หรือใช้น้ำยาทาก็ได้

การแก้ปัญหา หมุนแป้นที่จับสีเขียวของวาล์วนที่ดูไปจากบริเวณที่แสดงเครื่องหมายปิดกัญแจ

เพื่อให้ปลายองคชาตถูกดูเข้าไปข้างในที่ดูอีก หมุนแป้นที่จับสีเขียวเพื่อปิดวาล์ว โดยการหมุนแป้นที่จับสีเขียวไปที่เครื่องหมายปิดกัญแจ

หากปลายองคชาตยังหลุดออกมาได้อีก แปลว่าสาเหตุมาจากดูยางที่มีขนาดใหญ่เกินไปปลายองคชาต

10. ท่านสามารถเลือกจัดขนาดให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน จึงนับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งาน

สูงสุด หากท่านรู้สึกว่ ที่ดูขนาด M พอดีสำหรับท่าน แต่ดูยางนั้นมีความใหญ่เกินล้าอวัยวะเพศ ท่านสามารถใช้ดูยางขนาด S ร่วมกับที่ดูขนาด M และในท่านเองเดียวกัน ท่านใช้ดูยางขนาด M ร่วมกับที่ดูขนาด L

โปรดอย่าใช้ ใช้ดูยางขนาด S ร่วมกับที่ดูขนาด L เพราะดูยางจะสึกขาด **การบำรุงรักษา**

ควรจะปลดดูยางออกจากที่ดู และเพื่อให้ดูถูกสุขอนามัย ควรจะซักด้วยมือใช้น้ำอุ่นและสบู่ เก็บด้วยวิธีม้วน

จนกว่าจะใช้ โปรดอย่าลืม ม้วนเก็บดูยางหลังใช้ และโรยภายนอกด้วยแป้งเด็ก

ที่ดูก็ควรได้รับการทำความสะอาดเช่นดูยางด้วย ก่อนล้าง โปรดอย่าลืมแกะบีบออกก่อน โดย

หมุนแป้นที่จับสีเขียวของวาล์วนที่เป็นรูปลูกศรสองอัน และค่อยๆดึงบีบออกจากที่ดูอย่างระมัดระวัง

ระวังอย่าให้น้ำดูถูกน้ำ หรือไปที่สัญญาณว่าการดู เพื่อให้ปลายองคชาตถูกดูเข้าไปข้างในที่ดูอีก หมุนแป้นที่จับสีเขียวเพื่อปิดวาล์ว

โดยการหมุนแป้นที่จับสีเขียวไปที่เครื่องหมายปิดกัญแจ



ค่าน้ำ

เนื้อเยื่อของร่างกายแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันตามกรรมพันธุ์ เราจึงได้พัฒนาระบบใช้งานแบบไฟสัญญาณ เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมแรงดึง ที่เข็มขัดได้อย่างเหมาะสม

เมื่อเริ่มต้นระวังให้สัญญาณเป็นสัญญาณสีเขียวอยู่เสมอ เพื่อให้ท่านจะได้ประสบความสำเร็จในการใช้อุปกรณ์เพิ่มขนาด

และความยาวของอวัยวะเพศ โดยไม่เกิดผลข้างเคียง **วันที่ 1.**

ตั้งค่าแรงดึงให้อยู่ในเป็นสัญญาณสีเขียวเท่านั้น และใช้ PHALLOSAN® เพียง 1 ชม. ถอดเข็มขัดออก

หมุนแป้นที่จับสีเขียวของวาล์ว ไปสู่บริเวณที่เครื่องหมายลูกศร เพื่อคลายสัญญาณ

ม้วนดูยางด้วยความระมัดระวังกลับไปในทิศทางปลายองคชาต และแกะส่วนของชุดที่ดูออก

ม้วนดูยางด้วยความระมัดระวังกลับไปในทิศทางปลายองคชาต และแกะส่วนของชุดที่ดูออก

ตรวจสอบดูอวัยวะเพศของท่าน บริเวณระหว่างท่อเปิดปัสสาวะ และเนื้อเยื่อเอ็นปิดปลายองคชาต (Frenulum) ทางด้านล่าง

บริเวณนี้เป็นที่ที่มีความรู้สึกไวมากที่สุดของอวัยวะเพศ หากบริเวณนี้มีรอยแดง หรือบวม

แสดงว่าแรงดูนั้นมากเกินไป เลิกใช้ในวันนั้น และควรเริ่มใช้อีกครั้งต่อเมื่ออาการที่พบนั้น หายขาดดีแล้ว

วันที่ 2. วันที่ 8.

หากการใช้งาน PHALLOSAN® ในวันแรก ไม่ก่อให้เกิดอาการมีรอยแดง หรือบวม

ใดๆในบริเวณดังกล่าว ท่านสามารถใช้ PHALLOSAN® เพิ่มขึ้นได้อีก 1 ชม. และเพิ่มการใช้วันละ 1 ชม. ทุกๆวัน เมื่อครบ

8 วัน ถือว่าท่านได้ปรับตัวทำความคุ้นเคยกับการใช้

ท่าน อาจใช้ PHALLOSAN® กลางคืนได้ หลังจากท่านได้ปรับตัวทำความคุ้นเคยกับการใช้แล้ว

จากการสัมผัสสัมผัสจะพบว่า ที่บีบตรงสัญญาณว่าทำงาน หรือหยุด มีปุ่มนูนที่ช่วยให้ท่านรู้สึกสัมผัสได้ว่าขณะนั้น

บีบทำงาน หรือปิด โดยที่ท่านไม่ต้องมองเห็น ดูยางจะยึดตัว

หากมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การไหลเวียนโลหิตจะไม่ถูกรบกวน แต่กลับดีขึ้น

ท่านจะรู้สึกอยากจะใช้ PHALLOSAN® forte ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

อวัยวะเพศของท่านจะยาวขึ้น และขนาดเส้นรอบวงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ท่านจะรู้สึกว่าการทางเพศมากกว่าเดิม

ท่านจะมีความรู้สึกต้องการทางเพศมากกว่าเดิม

ระยะเวลาการใช้

หากมีอาการบวม หรือพองมีตุ่มน้ำเหลืองตรงเนื้อเยื่อปิด หรือที่ปลายองคชาต

แสดงว่าแรงดูนั้นมากเกินไป ท่านต้องหยุดใช้จนกว่าอาการบวม และหรือมีตุ่มน้ำเหลืองนั้นหายดี

หลังจากนั้นตั้งแรงดูที่น้อยกว่าเดิม โปรดใช้ความอดทน กระบวนการนี้

เช่นเดียวกับที่แพทย์โรคกระดูกการใส่ที่ตัดพันแรงดูที่แรงๆ

เพียงอย่าเดียวไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ แต่ความสม่ำเสมอ

หากในขณะใช้ท่านรู้สึกเจ็บ จากการกดที่ล้าอวัยวะเพศ ซึ่งนั้นอาจเกิดจาก

ส่วนปลายหนาของดูยางวางพาดบนวงแหวนพองน้ำ จึงกด

การแก้ไข ม้วนดูยางที่พาดออกจากวงแหวนพองน้ำ

อาการเจ็บนั้นควรจะหายไป ท่านสามารถลดการกระจายแรงดูที่เพิ่มขึ้น

เพื่อที่จะลดแรงกดดันที่โคนอวัยวะเพศ โดยจับหมุนเข็มขัดบริเวณที่ยึดกับที่ดู

คลายออกเข็มขัดออกเล็กน้อย และหมุนขยับเพื่อกระจายแรงกดดันไปรอบๆ

ตัว ปรับใหม่ลดแรงดันที่ออกที่โคนอวัยวะเพศ

ซึ่งมีผลทำให้การรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บช้า
 และไม่สามารถตอบสนองได้ทันที งดการใช้
 PHALLOSAN® forte
 ในขณะที่มีอาการอักเสบ
 หรือเป็นแผลที่อวัยวะเพศ
**การวัดขนาดความยาวของอวัยวะเพศอยู่
 างถูกต้อง**
 ใช้ไม้บรรทัด หรือไม้เมตร
 สายวัดตัวไม่สามารถวัดได้ถูกต้อง
 วัดในขณะที่อวัยวะเพศของท่านแข็งตัว
 และจับให้ยืดตรงไปข้างหน้า ทำมุม 90
 องศาต่อร่างกาย เมื่อวางไม้บรรทัด
 หรือไม้เมตร จากด้านบน ไปจนถึงข้าง
 แล้วกดปลายไม้บรรทัด
 หรือไม้เมตรให้ติดกับกระดูกหัวเหน่า
ข้อสำคัญ
 ชั่งน้ำหนักของตัวท่านเอง โดยไม่สวมเสื้อผ้า
 หากน้ำหนักตัวท่านเพิ่มขึ้น
 จะมีการสะสมไขมันบริเวณรอบๆอวัยวะเ
 พศชั้นไขมันนี้มีผลอย่างยิ่งทำให้ระยะระหว่าง
 ปลายของอวัยวะเพศของ
 ไปยังกระดูกหัวเหน่า
 ทำให้ความยาวของอวัยวะเพศที่วัดสั้นลง
 มีศัพท์ทางการแพทย์เรียกไขมันนี้ว่า
 ไขมันผ้ากันเปื้อน
การสังขิ้นส่วนอะหลัย์เพิ่มเติม
 ขิ้นส่วนอะหลัย์ของ PHALLOSAN® forte
 สามารถสั่งเพิ่มได้ หากท่านมีคำถาม
 หรือข้อคิดเห็น เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ
 ที่จะตอบคำถามท่านโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 ใดๆ
 อาจมีการแก้ไขทางเทคนิคใดๆขึ้นได้
 การเผยแพร่
 ท่านสามารถเข้าไปดูได้ในอินเทอร์เน็ต ที่

www.phallosan.at, www.phallosan.de
 www.phallosan-info.ch **สายด่วน**
 Orbisan Consulting GmbH,
 Maximilianstr. 9
 D-82319 Starnberg
 ผู้จัดการ Dipl. Kfm. U. Jochum
 เลขผู้เสียภาษี: DE 282630327
 โทร.: +49 (0)81 51 971 89 10
 โทรสาร: +49 (0)81 51 971 89 20
 อีเมล: info@phallosan.com
